

緩釋型霧化吸入劑 (Respimat®)


正確使用，藥效更好，幫助您呼吸更順暢！



裝填藥物步驟

1 拔蓋

將安全扣按住，拔下透明底座。

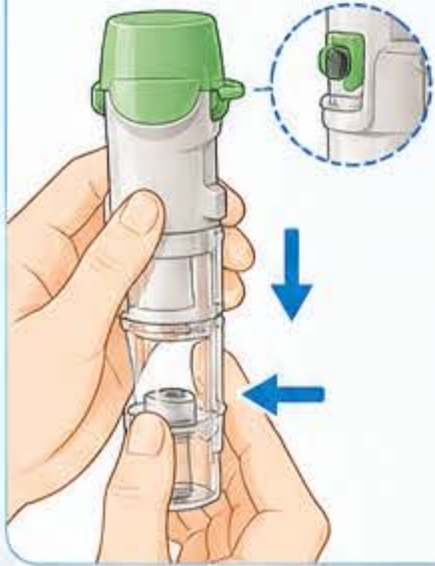

2 裝藥

將藥罐窄端開口對著吸入器。



3 裝填

將藥罐壓到底，推入吸入器，藥罐一旦插入，**勿再取出**。



4 噴藥

裝上透明底座，第一次裝填完畢，**先試噴三次**，確認有噴霧在正式開始使用。



吸入藥物步驟

1 旋轉透明底座

吸入器朝上，綠色蓋子蓋緊，將透明底座依標籤紅色箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲。



2 打開綠色蓋子



3 呼氣

慢慢將肺中空氣完全呼出。



4 深吸氣並按壓給藥

緊閉雙唇含住口含器，但勿遮住通氣孔，將此藥物吸入器指向喉嚨深處，用口慢慢地深吸氣時，按壓給藥按鈕，然後繼續緩慢吸氣，吸飽氣候後**憋氣 10 秒鐘**。



5 蓋回綠色蓋子



使用小提醒

- 含住口含器時，雙唇緊閉，但不可遮住兩側通氣孔。
- 吸入過程要慢慢、深而穩定，才能讓藥藥物充分到達肺部。
- 每次使用後，請關上綠色蓋子，保持清潔。

注意事項

- 藥罐一旦插入吸入器後，請勿取出。
- 若超過 3 天未使用，請先試噴一次。（朝空氣方向噴 1 次）
- 請定期清潔口含器：以濕布或紙巾擦拭口含器（不可拆開），避免阻塞影響藥效。



保存方式

- 請存放於室溫乾燥處，避免陽光直射與高溫。
- 請放置於兒童拿不到的地方。